

O₂MODA

光透美容面罩

LED Beauty Mask

Daily beauty care

光美容保養

產品說明書



△ 使用前請詳閱說明，勿直視光源或長時間停留於同一部位。

本產品非醫療器材，使用前請詳閱說明書

Glow Care

產品概述

本產品採用柔軟親膚的液態矽膠材質製成，面罩內外層及眼周接觸部位皆以舒適配戴為設計考量。產品搭配可調式頭帶設計，可依個人需求調整鬆緊度，以提升配戴穩定性與舒適性。

本產品內建 54 顆 4 合 1 LED 光源模組，可提供近紅外光（850nm）、紅光（630nm）、黃光（590nm）及藍光（415nm）等多種光源模式，共計 216 道光束。使用者可透過控制器選擇光源模式、能量等級及使用時間。

面罩採用輕量化中空結構設計，有助於降低配戴時的重量感，提升長時間使用的舒適度。

懸浮式結構搭配眼部支撐設計，使面罩與臉部保持適當距離，讓光源均勻覆蓋面罩內部照射區域，同時提升配戴時的舒適感受。

產品採用一體成型製程，將 LED 光源模組整合於液態矽膠結構中，有助於保護內部元件並提升產品耐用性。

本產品具備 **IP67 防塵防水設計**，日常清潔時可使用清水沖洗面罩表面，請勿將控制器或充電連接部位浸泡於水中。

產品規格



光透美容面罩



控制器



Type-C 充電線



可調式頭帶

型號	OMM-1
淨重	93G
尺寸	240*200*40MM
輸入電壓	DC 5V 1A
功率	4.5W
電池容量	2600mAh
標準	GB 4706.1-2005&GB 4706.15-2008

LED 光感護理特色

本產品採用多種波長 LED 光源設計，提供多元光感照射模式，適合作為日常保養程序的一部分。使用者可依個人需求選擇不同光源模式及使用時間，享受舒適的光感使用體驗。


產品特色：

- 提供多種波長 LED 光源模式選擇
- 提供舒適柔和的光感照射體驗
- 可搭配日常保養程序使用
- 提供個人化能量與時間設定功能
- 採用輕量化通透配戴設計，提升使用舒適度

光感模式：

- 紅光模式（630nm）：提供柔和光感照射模式，適合作為日常保養程序的一部分。
 - 黃光模式（590nm）：提供舒適光感照射模式，可搭配日常保養使用。
 - 藍光模式（415nm）：提供清爽光感照射模式，適合作為日常保養程序的一部分。
 - 近紅外光模式（850nm）：提供近紅外光照射模式，帶來溫和舒適的使用體驗。
-

使用方式

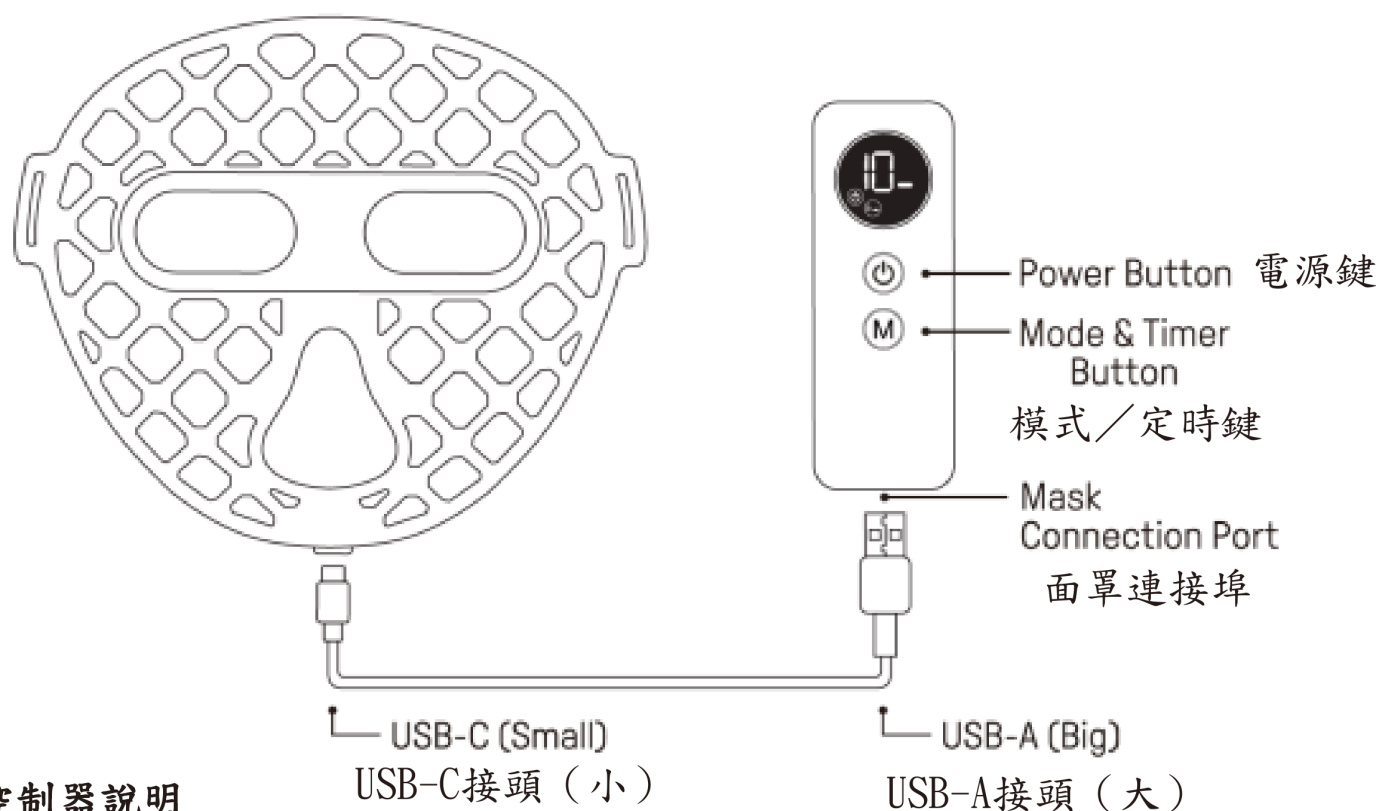


控制器說明

- 將原廠連接線 USB-C 端插入面罩連接埠。
- 將原廠連接線 USB-A 端插入控制器底部連接埠。
- 長按電源鍵約 2 秒開機，顯示螢幕亮起後即可開始操作。
- 請依需求選擇光源模式、能量等級及使用時間。
- 詳細操作方式請參閱本說明書相關內容。

*注意事項

- 請僅使用產品隨附之原廠連接線。
- 使用非原廠連接線可能導致產品運作異常或影響使用體驗。
- 為避免發生故障，請務必使用隨附的原廠連接線。原廠連接線附有識別標籤，如下圖所示：




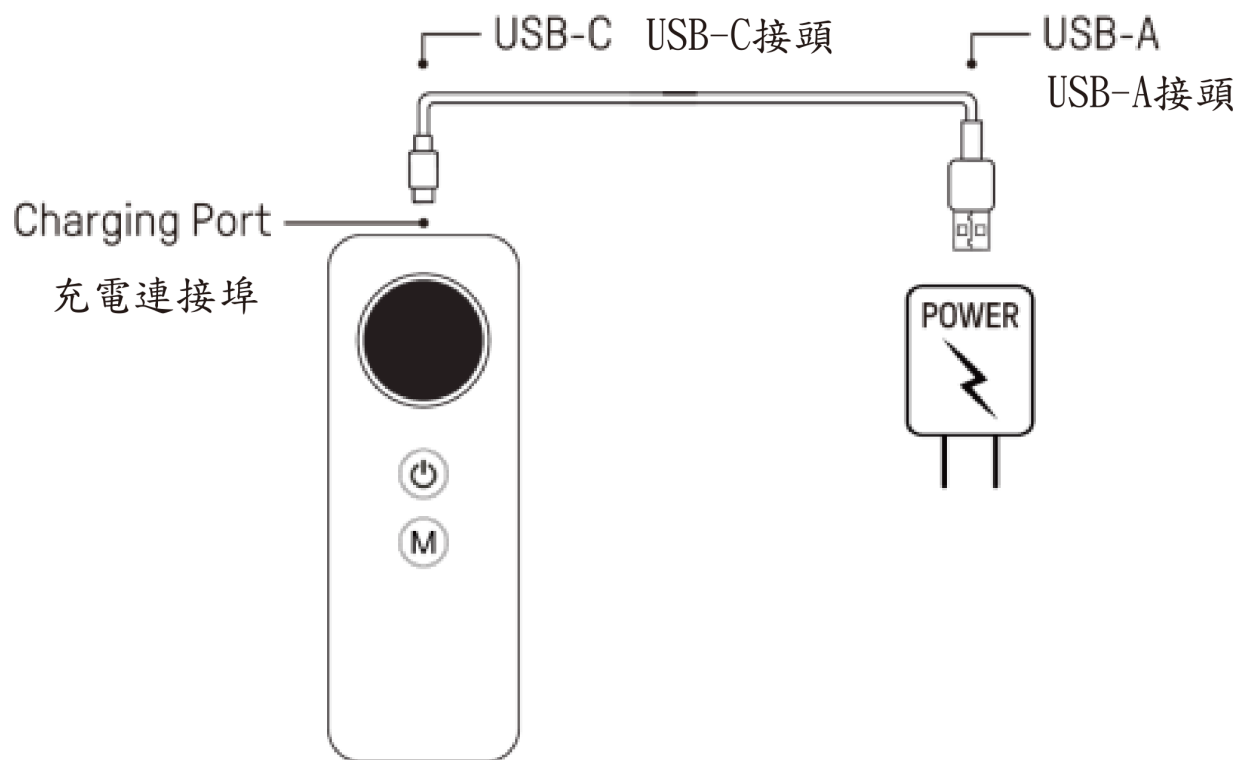


控制器充電說明

- 將原廠連接線的 USB-C 端連接至控制器頂部。
- 將原廠連接線的 USB-A 端連接至電腦、筆記型電腦、行動電源或輸出
不超過 5V/2.4A 的充電器。
- 充電前，請確認連接線未受損，且所有連接埠均已完全乾燥。
- 充電期間，指示燈會閃爍。當所有指示燈持續亮起且停止閃爍時，表示
控制器已充滿電。
- 充電完成後，請拔除控制器的充電連接。
- 請勿整夜為控制器充電，或於無人看管的情況下進行充電。


控制器充電期間，請勿使用面罩。

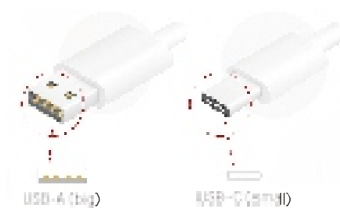

3、配戴面罩

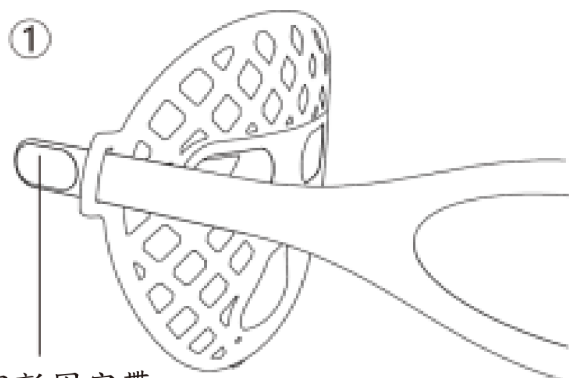

請確認面罩外側朝向自己將魔鬼氈頭帶穿過左側耳孔並固定。

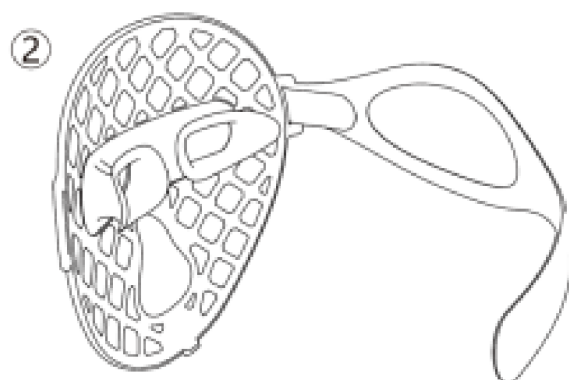


將頭帶另一側穿過面罩，調整至舒適後固定。




從頭頂方向配戴面罩，並調整鼻樑位置以提升舒適感。若您綁馬尾，可將頭髮穿過頭帶孔。

④

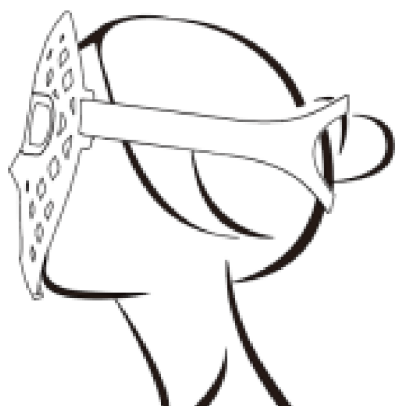

依需求調整頭帶鬆緊，使面罩穩固但舒適貼合。


4. 連接面罩與控制器

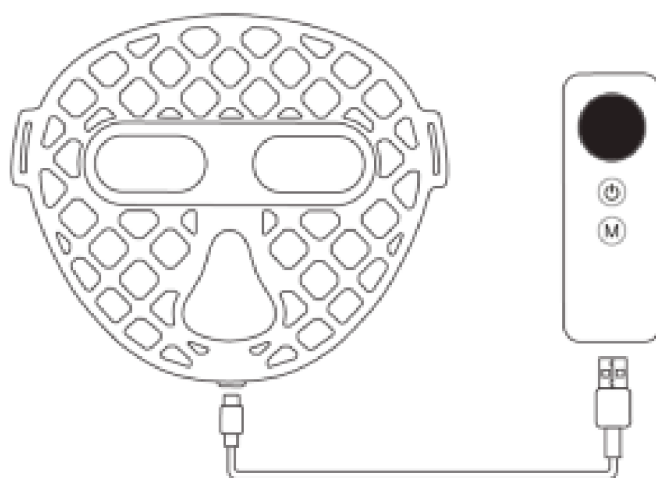

使用附帶的線材將面罩連接至控制器。


5、開／關機

長按電源鍵 1.5 秒即可開機。
顯示螢幕將會亮起。

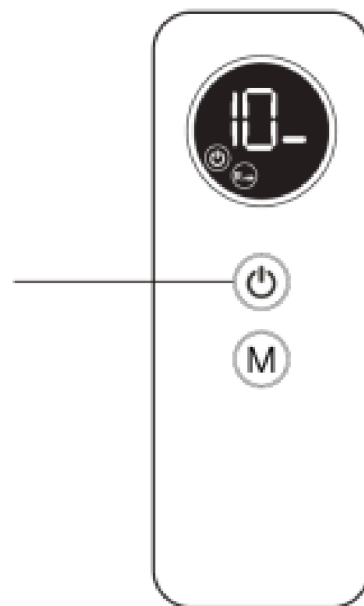

6、選擇模式

按下「M」按鍵可切換光波模式：
紅光、藍光或黃光。
模式選定後，計時將自動開始。

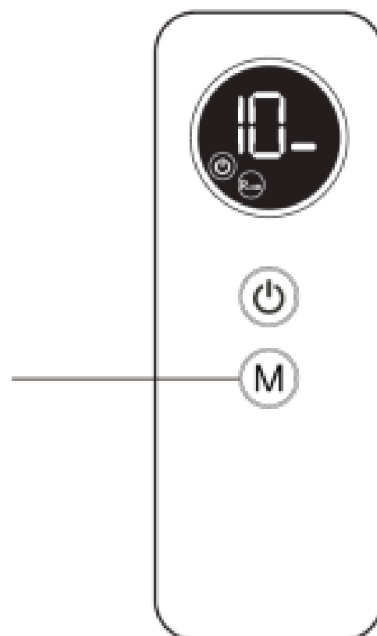

7. 調整能量等級

短按電源鍵可循環切換三段能量等級。


*使用建議：

首次使用時，建議由最低等級開始。

可依個人使用感受逐步調整至適合的能量等級。

如希望獲得較溫和的使用體驗，建議選擇

較低能量等級。

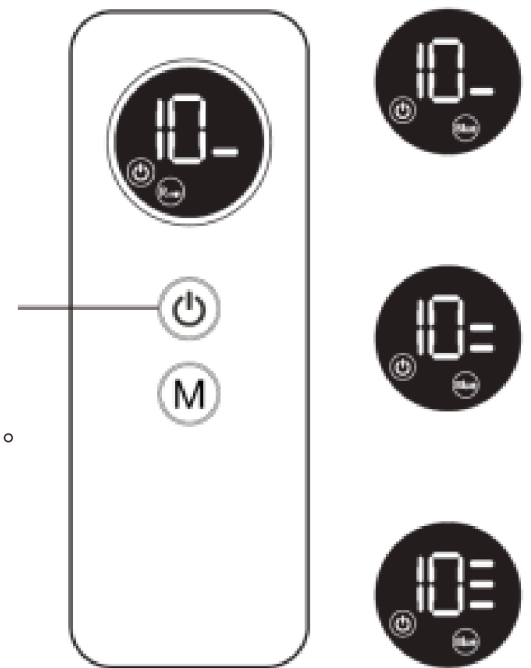


8. 設定美容時間

長按「M」按鍵 1.5 秒即可設定使用時間。

可選擇：10, 15, 20, 30 分鐘

我們建議每日使用 10 分鐘，總使用時間每日不超過 30 分鐘。

您也可搭配不同模式，如：先使用 10 分鐘紅光，再接續 10 分鐘藍光或黃光。

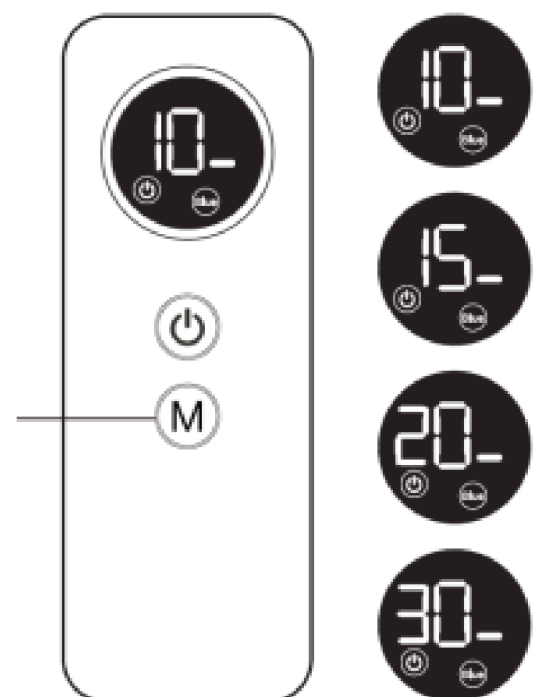

安全使用步驟

1. 敏感測試

首次使用前，請先進行敏感測試：

- 將裝置放於手臂內側。
- 開啟裝置並使用 10 分鐘。
- 若感到不適，請立即停止使用。
- 使用後請等待至少 6 小時。若出現紅腫或搔癢，請勿將面罩使用於臉部。

2. 開始使用

- 清潔臉部並卸除所有彩妝。可使用化妝水，但請避免使用感光性或美白產品。
 - 將面罩穩固配戴於臉部。
 - 將面罩連接至控制器。
 - 長按電源鍵 2 秒開機，依需求選擇模式後開始使用。
 - 使用結束後，可依個人平日保養習慣進行後續保養。
 - 建議每週使用 3~5 次，並依個人需求調整使用頻率。
-

清潔與保養

- 每次使用前後，請以柔軟乾布或濕紙巾清潔面罩。
- 面罩可於流水下沖洗，但請確認控制器已拔除並斷開連接。
- 請勿強力揉搓或扭曲面罩。
- 請將裝置存放於乾燥且避免陽光直射之處。

安全注意事項

- 不適用於兒童、孕婦、哺乳婦女，或患有嚴重肝斑或皮膚疾病者。
 - 避免於使用本產品前後，同時使用強效去角質產品或痘痘治療產品。
 - 若出現搔癢、腫脹或刺激感，請立即停止使用；必要時請諮詢醫療專業人員。
-

故障排除

問題	可能原因	處理方式
1~2 種模式無法亮燈	非原廠連接線／ USB-C 接頭連接鬆脫	請使用附有原廠標識的連接線， 並確認兩端已完全插入
面罩 LED 燈閃爍	電池電量不足	請將控制器充滿電後再使用
控制器充電時無反應	充電器故障或電源插座異常	請檢查充電器，或更換其他電源 插座測試
裝置使用時略有溫熱感	正常運作現象	無需特別處理（如感覺異常過 熱，請停止使用）
裝置出現明顯過熱情形	產品異常	請立即停止使用，並聯繫客服人 員

其他問題：請聯繫客服中心尋求協助。

保固資料

項目	內容
產品型號	
訂單編號	
購買日期	
購買人姓名	
電子郵件EMAIL	
聯絡電話	

O₂MODA

光透美容面罩

科技養膚，透亮日常

WELLNESS • TECHNOLOGY • HEALINGD

品牌商 舒博美生物科技國際股份有限公司

客服電話 02-29106340

官網 <https://www.o2moda.co/>

地址 新北市新店區寶福里中興路二段196號6樓



關注我們

了解更多最新消息